

EEN STER IS GEBOREN

de ultieme
huidanalyse-ervaring



Soft
FX



DE REVOLUTIONAIRE HUIDANALYSE TECHNOLOGIE

Ontdek het exclusieve **Soft FX**-huidanalysesysteem dat voor alle huidverzorgers ontworpen is om hun esthetische activiteiten te ondersteunen en hun professionaliteit te vergroten.

Het identificeren van huidverzorgingsproblemen en het volgen van de voortgang zijn essentieel voor het opstellen van een huidverzorgingsplan voor uw klanten en voor op maat advies in de loop van de tijd.

Het **Soft FX** toestel biedt een verscheidenheid van exclusieve functies die aan de behoeften van professionals voldoen, waaronder de nieuwste analyseoplossingen, de aanbevelingen voor verschillende delen van het lichaam, de vergelijking van resultaten, de afbeeldingen voor en na de behandelingen en het e-mailen van de rapporten.

Compact, volledig zelfstandig apparaat. Klantrapporten en files worden op het apparaat opgeslagen

"Selfie" camerafunctie aan de voorkant voor gerichte en gepersonaliseerde huidverzorging

Volledig draadloze en snel oplaadbare sonden

Snelle metingen van huidaandoeningen en visuele beeldvorming in één apparaat

Iconische ontwerpkenmerken en functies.

Schitterend HDMI 10,1" full-angle touchscreen

Ultieme digitale oplossingen. Volledig rapport geleverd op een smartphone, tablet (iOS of Android) of via e-mail.



Soft
FX

EXCLUSIEVE HUIDANALYSE VOOR MEERDERE GEBRUIKEN

die al de huidverzorging van uw klanten omvat



/ SNELLE TESTEN - SONDEN

De sonden meten de huid om de belangrijkste problemen op het gebied van huidverzorging te identificeren.

Gewoon drukken op de huid om de resultaten te bekijken van:

- ◆ Hydratatie
- ◆ Elasticiteit
- ◆ Melanine
- ◆ Sebum
- ◆ pH




/ SCHITTERENDE VISUELE BEELDEN - CAMERA


Duidelijke HD-beeldvorming laat uw klanten zien hoe de huid er echt uit ziet, terwijl de computervisiebeoordeling van beelden de informatie levert die u nodig hebt om huidverzorgingsproblemen en aanbevelingen uit te leggen.

- | | | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|
| ◆ Pigmentatie | ◆ Rimpels | ◆ Roodheid | ◆ Haardiameter | ◆ Haardichtheid |
| ◆ Poriën | ◆ Textuur | ◆ Keratine | ◆ Haarstructuur | ◆ Roos |

Visuele beeldvorming met de camera - voorbeelden

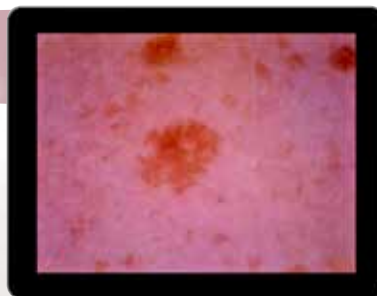

PIGMENTATIE

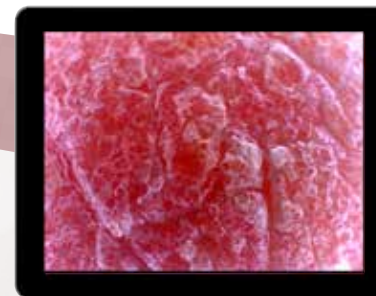

KERATINE



HAARSTRUCTUUR

AANBEVELINGEN

De aanbevelingen zijn zeer gebruikersvriendelijk, volledig begeleide beoordelingen, waarbij de sonden en/of visuele beeldvorming met de camera worden gebruikt, die een ongeëvenaarde huidanalyse van verschillende delen van het lichaam opleveren.

De aanbevelingen omvatten:



HAAR

Check Up

Ontwikkeld om de belangrijkste problemen van de huid te identificeren en te beoordelen, waaronder pH-, hydratatie-, sebum- en elasticiteitsniveaus. Een "must" voor een eerste analyse van de huid.

Check Up Pro

Zoals hierboven. Bevat ook HD visuele weergave van de huid met de camera.

Fototype

Classificeert het huidtype in termen van reactie op blootstelling aan ultraviolette straling (UVR).

Age Perfect

Identificeert de belangrijkste tekenen van huidveroudering, waaronder elasticiteit, sebum, melanine uniformiteit en hydratatie-niveaus, zodat u de verzorging die nodig is kunt leveren.

Age Perfect Pro

Zoals hierboven. Bevat ook HD visuele weergave van de huid met de camera.

Zonnebescherming

Ontwikkeld om de zonbescherming voor elk huidtype aan te bevelen op basis van het fototype en de blootstellingscondities.



Screenshot van beschikbare programma's (huid)

Purit.y

Voor een onzuivere huid die vaak een onevenwichtige olie- en vochtmantel heeft die tot een gevoelige huid leidt.

Sensit.y

Deze huidcontrole beoordeelt de parameters die essentieel zijn om de gevoeligheid van de huid te begrijpen en wat eraan te doen.

Illumin.y

Op zoek naar een stralende, helderdere en gelijkmatige huid? Dit consult beoordeelt verschillende parameters, waaronder melanine, huidtextuur en het aantal dode huidcellen.



HAAR

Focus Hoofdhuid

Goed haar begint bij een gezonde hoofdhuid. Dit is een grondige beoordeling van de hoofdhuid waarop u uw aanbevelingen kunt baseren.



DECOLLETÉ

Decolleté Expert

Een uniek advies beoordeelt de huid van het delicate gebied van het décolleté dat onderhevig is aan veroudering en verlies van toon.



HANDEN

Schoonheid Hands

Handen vertonen de eerste tekenen van veroudering. Dit programma richt zich op huidveroudering en gevoeligheid.

◆ "OP MAAT AANBEVELING" EXCLUSIEVE FUNCTIE ◆

Ontwikkel unieke programma's voor de huid, het haar of het lichaam met de Soft FX op basis van de huidverzorgingsbehoeften van uw klant en de aangeboden behandelingen/producten.

RESULTATEN

Volledig rapport geleverd op een smartphone, tablet
(iOS of Android) of via e-mail vanaf het toestel.



RESULTATEN

vermijden van subjectieve interpretatie

OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN

ondersteunen uw beoordeling



PRODUCT/BEHANDELING ADVIES

gebaseerd op bekomen resultaten





VOLG TRENDS EN BEKIJK DE VOORUITGANG IN DE TIJD

Volg de huidverzorgingstrends van uw klant op in de loop van de tijd

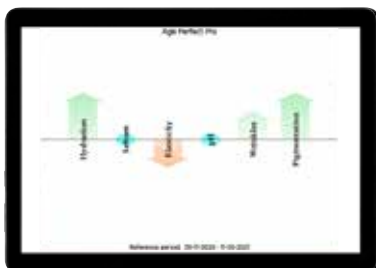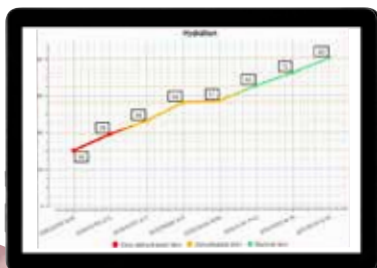

Vergelijk afbeeldingen van de huid voor en na de behandeling

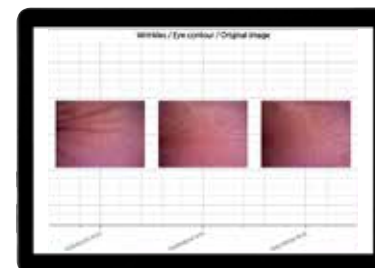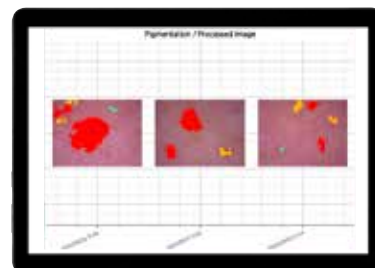

/ TECHNISCHE KENMERKEN

DISPLAY	TFT 10.1" met capacitief multitouchscreen
FULL-FACE CAMERA	Max resolutie : 5 MP - 2592x1944 Auto-focus Beeldhoek: 60° c
VERBINDING	Ethernet, wifi en wifi-hotspot Bluetooth Low Energy voor communicatie met de sondes
INTERN GEHEUGEN	4GB
EXTERNE MONITOR	HDMI
INTERFACE	2xUSB
GEWICHT	3 Kg
AFMETINGEN	310 (w) x 170 (d) x 225 (h) mm
VOEDING	12V DC - 5 A
ENERGETISCHE ABSORPTIE	Max. 60 Watt
WERKCONDITIES	Temperatuur 15 - 30° C (relatieve vochtigheidsgraad: 5-85% niet-condenserend)
OPSLAGCONDITIES	Temperatuur 0 - 50° C (relatieve vochtigheidsgraad: 5-85% niet-condenserend)
CERTIFICATEN	CE-markering
CERTIFICATEN	MET-markering

MEETPRINCIPE		VELD	RESOLUTIE
HYDRATATIE (MEL-HYD FX)	Capacitief	0-100 a.e.	1 a.e.
MELANINE (MEL-HYD FX)	Reflectiefotometrie op 2 golflengten (λ1=875nm, λ2=660nm)	0-100 a.e.	1 a.e.
pH (pH FX)	pH-gevoelige glaselektrode	2-10	0.1
SEBUM (TAPE FX)	Computer vision	0-100 a.e.	1 a.e.
ELASTICITEIT (ELA FX)	Stress/vervorming	0-100 a.e.	1 a.e.

BEELD	SENSOR	VERGROTING	RESOLUTIE
MICROCAMERA (CAM FX)	CMOS ½ VGA-kleursensor	Type lens en vergroting : 100X et 400X	1.3 MP - 1280x1024

Callegari Benelux B.V.B.A. is a Catellani Group Company



www.callegari1930.com

Maatschappelijke zetel

Chaussée d'Alsemberg, 824 -1180 Bruxelles

BTW/TVA BE 0809.646.528

GSM: +32 471 04 53 03

info.be@catellanigroup.com